



ケンコー超音波 UV 入れ歯洗浄器

取扱説明書

KHB-401

この度はケンコー「超音波 UV 入れ歯洗浄器」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。お使いの前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、取扱説明書は必ず大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお読みください

- 可熱ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- 本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工及び、火中投入など行なわないでください。
- 本製品を高温の場所（真夏の車内、窓辺、暖房器具のそば）で使用、保管しないでください。
- UV ランプの紫外線は人体に害のないランプを使用していますが、直視しないでください。
- 本製品は防水構造ではありません。製品内部に水が入ると感電・故障の原因になります。
- 落としたり、ぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
- 電極部分などには一切触れないでください。感電や故障の原因になります。
- 小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲に放置しないでください。
- ポリ袋（包装用）などを小さなお子様の手の届くところに置かないでください。口にあって窒息の原因になることがあります。

電池に関する安全上の注意


- ・ショート、分解、加熱、充電、（+）（-）の逆方向のセットをしないでください。使用済みの電池を火に入れるなどしないでください。使いきった電池はすぐに本体から取り出してください。
- ・電源が切れていても微弱電流が流れています。長期間（およそ1ヶ月以上）使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
- ・新しい電池と古い電池を混用しないでください。
- ・種類の違う電池を混用しないでください。
- ・電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万が一電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- ・アルカリ乾電池のアルカリ液がもれて、皮膚や衣服に付着した場合は失明やケガなどの恐れがありますので、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
- ・使用済みの電池は、お住まいの自治体が定めた方法で処分してください。
- ・電池は気温0℃以下または40℃以上では正常に動作しない場合があります。

使用上のご注意

- 付着した黄ばみ、ヤニは落ちません。歯ブラシや市販の洗浄剤を使用して洗浄してください。
- インナーケースに水を入れる際には、必ず本体から取り出してからおこなってください。本体にインナーケースを入れたまま水を入れしないでください。本体に水がかかると故障の原因になる場合がございます。
- 本体は防水仕様ではありません。本体を水に浸けたり、水をかけて洗わないでください。（使用中にしぶきがかかる程度は問題ありません。）
- 宝石、ジュエリーなど、入れ歯以外のものには使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、本体をよく乾かし水気を取ってから保管してください。

各部名称

【正面】

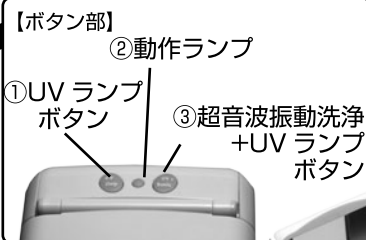

窓部

【ケース開時】

インナーケース



【裏面】

電池ケース
固定ネジ

電池ケース



ジャック


電源のセット

◆電池を使用する場合（別売となります）

1. 本体裏面にある電池ケース固定ネジをマイナスドライバーではずし、電池ケースを開きます。

2. 単3形乾電池（別売）3本を電池の+側-側を確認し、正しい方向にセットします。

電池ケース
固定ネジ

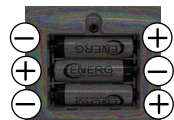


注意

- 電池を本体から着脱する場合は、必ず電源をオフにした状態でおこなってください。
- 電池は+方向に注意し、正しくセットしてください。
- 長期間使用しないときは電池を取り外してください。

◆ACアダプターを使用する場合（別売となります）

1. 本体の横にあるジャックにACアダプターのジャックを差し込み、ACアダプター本体をコンセントに差し込みます。

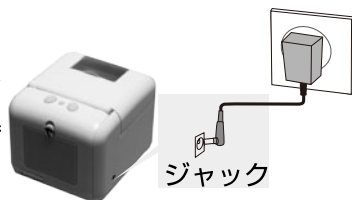

ジャック



注意

- ACアダプターは、指定のものをお使いください。それ以外のアダプターを使用した場合、故障の原因となることがあります。
- 長時間使用しない場合は、本体から電源をはずしてください。
- ACアダプターを使用時は、乾電池をはずしてください。故障の原因となります。

使用方法

1. 本体の蓋をあけ、中からインナーケースを取り外します。
2. インナーケースに洗浄する入れ歯などを入れ、水またはぬるま湯を8分目くらいまで入れます。
※入れ歯は、外した後サッと水洗いしてからセットしてください。
※汚れがひどい場合には市販の洗浄剤を入れると効果的です。洗浄剤を入れる場合には完全に溶けたことを確認してください。
※洗浄される場合は、インナーケースの蓋は外してお使いください。
3. インナーケースを本体に戻し、本体の蓋をしめます。この際に、本体に水がかからないようご注意ください。

※使用時は、安定した平らな場所でご使用ください。

◆超音波振動による入れ歯洗浄

1. 超音波振動洗浄 + UV ランプボタン③を押します。
2. 動作ランプ②が赤青の交互に点滅します。
3. 超音波振動洗浄は、約5分後に自動で止まり、その後 UV ランプが自動で始まります。
4. UV ランプは、約15～20分後に自動で止まります。
※洗浄中に停止したい場合は、超音波振動洗浄 + UV ランプボタン③を3秒間押し続けてください。

◆UV ランプによる除菌

UV ランプを点灯して、入れ歯を除菌します。

UV ランプ除菌のみをおこなう場合は、水を入れる必要はありません。

1. 洗浄後、UV ランプボタン①を押します。
2. 動作ランプ②が青色に点滅します。
3. 約15～20分後に自動的に止まります。
※除菌中に停止したい場合は、UV ランプボタン①を3秒間押し続けてください。

◎途中で蓋を開けると安全機能が働き、UV ランプが自動的に消灯します。

◎窓部を開け歯ブラシを入れることにより、歯ブラシを洗浄することも可能です。

■個人情報について

※本保証書を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに破棄いたします。

※ご協力いただいたお申し込み事項につきましては、ご提供いただきました個人情報（年齢、性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります）

※当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。

●お客様の承諾を得た場合。

●お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図られるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。

本 社 〒161-8570 東京都新宿区西荻南3-9-19

■東京営業所 TEL 03(5582)1092(代) ■広域販売部 TEL 03(5582)1098(代)

大阪営業所 〒540-0005 大阪市中央区上町1-2-13

■大阪営業所 TEL 06(6787)2640(代) ■大阪販売課 TEL 06(6787)2652(代)

名古屋出張所 〒460-0008 名古屋市中区栄1-15-6 サカエマヤタビル1F

TEL 052(232)3331(代)

札幌出張所 〒060-0042 札幌市中央区大通西15丁目1-11 北日ビル大通405号

TEL 011(613)2176(代)

仙台出張所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉3-3-21 上杉NSビル2F

TEL 022(211)0180(代)

福岡出張所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-12-3 玉井総ビル1-H

TEL 092(476)5071(代)

ご使用後

- インナーケースには抗菌加工が施されていますので、水ですすぐだけでヌメリなどがつかずに保管できますが、定期的には中性洗剤で水洗いをしてください。
- インナーケースに入れた水を捨てる場合には、必ず先に入れ歯を取りだし、その後インナーケースを本体から取り出してください。その際には、本体に水がかからないようご注意ください。
- インナーケースを洗う場合には、必ず本体から取り出してからおこなってください。

仕様

サイズ (WxDxH)	約 10.4 x 12.7 x 10.0 cm
重量	約 365 g
インナーケースサイズ内寸	約 8.3 x 6.0 x 3.8 cm
UV 波長	265nm
振動周波数	15000Hz
電源	単 3 形電池 3 本 (別売) または AC アダプター (別売)
電池寿命	1 日 1 回 15 ~ 20 分使用 約 45 日 (アルカリ乾電池使用時)
材質	本体 / ABS 容器 / 日本製抗菌 PS



Kenko Tokina Co., Ltd.

株式会社 ケンコー・トキナー

<http://www.kenko-tokina.co.jp/>

本 社 / 〒161-8570 東京都新宿区西落合 3-9-19

■国内営業部 東京営業所 TEL 03-5982-1060 (代) ■広域販売部 東日本営業所 TEL 03-5982-1068 (代)

大阪営業所 / 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-2-13

■国内営業部 大阪営業所 TEL 06-6767-2640 (代) ■広域販売部 西日本営業所 TEL 06-6767-2652 (代)

札幌出張所 〒060-0042 札幌市中央区大通西 15 丁目 1-11 (北日ビル第二大通り 405 号) TEL 011-613-2176 (代)

仙台出張所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉 3-3-21 (上杉 NSビル2F) TEL 022-211-0180 (代)

名古屋出張所 〒460-0008 名古屋市中区栄 1-15-6 (サカエミヤシタビル1F) TEL 052-232-3331 (代)

福岡出張所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-12-3 (玉井親和ビル 1-H) TEL 092-476-5071 (代)