

Kenko

イヤホン型集音器

KHB-103

取扱説明書

Ver.1.1

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、本書は紛失しないように大切に保管してください。

はじめに

ご使用前にお読みください

- 大切な場面で使用する場合は必ず事前に試聴してください。
- 本製品の使用および故障により生じた直接、間接の損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本取扱説明書の図、写真の画面などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写することは、個人で楽しめる場合を除き禁止されています。
- 製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。
- 本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意

必ずお読みください

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するものです。
- 表示の意味は次の通りです。

	危険	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。
	警告	誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が予想される内容を示します。
	注意	誤った取扱いをすると、人が損害を負ったり物的損害の発生が予想される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害を示します。

図記号の例		○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は○の中や近くに文章や絵で示します。
		●記号は強制(必ずやること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図は一般的な強制を示します。

危険

	可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。 本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投下などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。 本製品を高温の場所(真夏の車内、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。
--	--

警告

	下記の発生時にはただちに使用を中止してください。 ・本製品を使用して皮膚のかぶれや湿疹が表れたとき。 ・本製品の使用中に何らかの聴力支障が表れたとき。 ※放置すると症状の悪化の恐れがあります。
--	---

警告

	集音器本体・電池を火の中に投入したりしないでください。 ※破裂する恐れがあります。 本製品を自転車やバイク、自動車を運転中に絶対使用しないでください。 本製品を足場の悪い環境や不安定な場所で使用しないでください。 ※事故の原因となります。
--	---

	お子様の手の届かない所に保管してください。 ・小さな付属品を飲み込む恐れがあります。万一飲み込んでしまった場合は、直ちに医師に相談してください。
--	---

注意

本製品は医療用機器ではございません。

	MRI(磁気共鳴画像診断装置)診断を受けるときは必ず本製品をはずしてください。 ※故障の恐れがあります。 ペースメーカーをお使いの方は作動に影響を与える恐れがありますのでご使用をお控えください。
--	---

	分解や改造は行わないでください。 内部は特に精巧にできています。またマイク部などを針、マッチ棒などでつつかないでください。※故障の恐れがあります。
--	--

	必要以上に大きな音で聞かないでください。 ※耳を痛める恐れがあります。 始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳をいためることがあります。 音量は少しずつ上げてご使用ください。 他人に本製品を貸したり、他人から借りたりするのはやめてください。 ※耳に合わず、耳を痛めたり、耳の病気が感染する恐れがあります。
--	--

注意

	付属のUSB ACアダプターおよびUSB接続ケーブル以外使用しないでください。 ※付属のUSB ACアダプターおよびUSB接続ケーブル以外を使用すると故障の原因になります。 強い衝撃を与えないでください。 ※本製品の誤った取り扱いにより万一生じた破損などの責任は一切負いかねますので予めご了承ください。 乳幼児や自分で意思表示のできない方には使用しないでください。 ※事故やトラブルの原因となります。 就寝時には使用しないでください。 ※事故や体調不良の恐れがあります。 激しい運動をするときは、本製品を使わないでください。 ※事故の恐れ、または落下による破損の恐れがあります。 携帯電話と一緒に本製品を使用しないでください。 ※発生する電波により、ノイズが入ったり、音が小さくなるなどの影響を受ける可能性があります。 本製品を水で濡らさないでください。万一濡らした場合は、点検を依頼してください。本製品を装着したまま、入浴や洗髪はしないでください。洗顔時、ヘアスプレー使用時は、本製品を濡らさないようにしてください。 ※事故の恐れがあります。
--	---


注意

	本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。 ●砂、ほこり、ちりの多い場所 ●火の近く ●湿ったところ ●振動の激しい場所 ●温度・湿度の変化が激しい場所 ●夏の車内や直射日光の当たるところ 使用環境および電池の状態により充電時間および電池持続時間は変化しますので目安としてください。
--	---


早見表

セット内容	各部の名称	充電方法	集音器のつけ方	電源のオン/オフ
 ▶1	 ▶2	 ▶3	 ▶4	 ▶5
音量調節	ハウリングの抑制方法	お手入れ方法	故障かな?と思ったら	主な仕様
 ▶6	 ▶7	 ▶8	 ▶9	 ▶10

1. セット内容

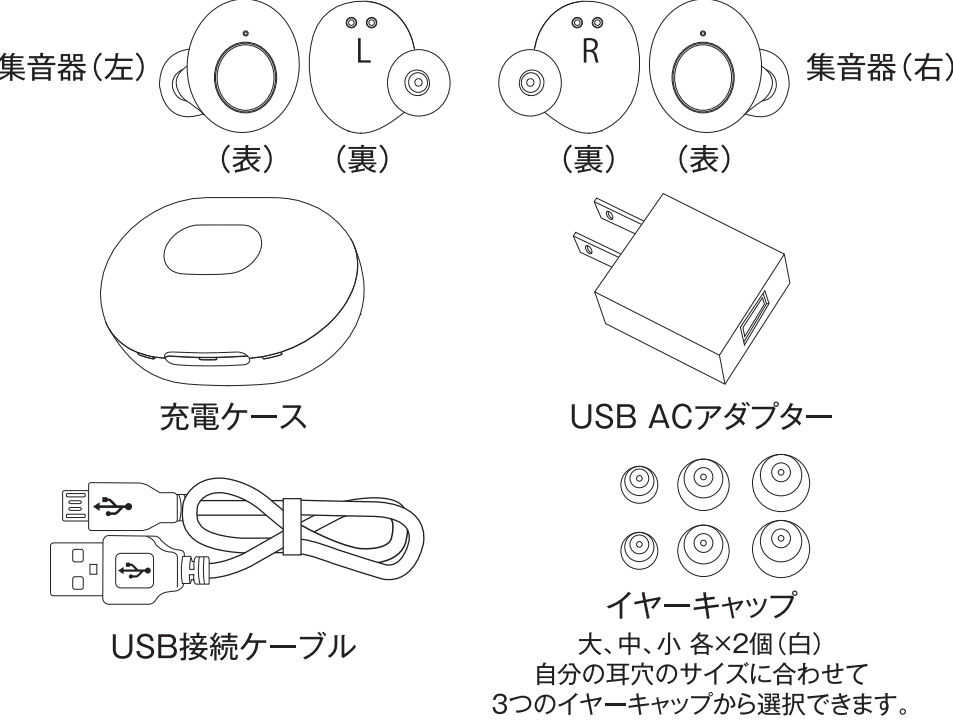

2. 各部の名称

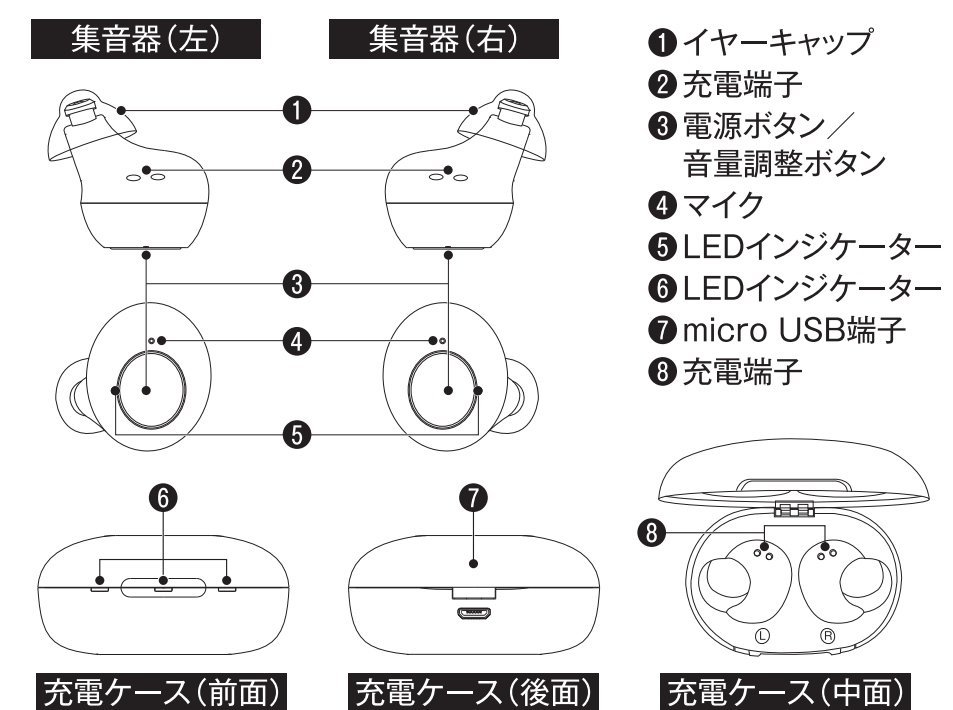


3. 充電方法

USB ACアダプター、USB接続ケーブルと充電ケースの取り付けは、ここに示す方法で行ってください。取り付け方法が正しくないと、本機が破損したり、火災の原因になることもあります。


① 充電ケースの充電

- ① microUSB端子(小さい方)を充電ケースのUSB端子に接続します。
各USB端子の向きに注意してください。
- ② USB接続ケーブルの大きい方を付属のUSB ACアダプターに差し込みます。
- ③ USB ACアダプターをコンセントに接続します。
- ④ 充電ケース中央のLEDインジケーターが青く点灯し、充電を開始します。
充電が完了するとLEDインジケーターが白く点灯します。
- ⑤ 充電ケースからUSB接続ケーブルを抜きます。

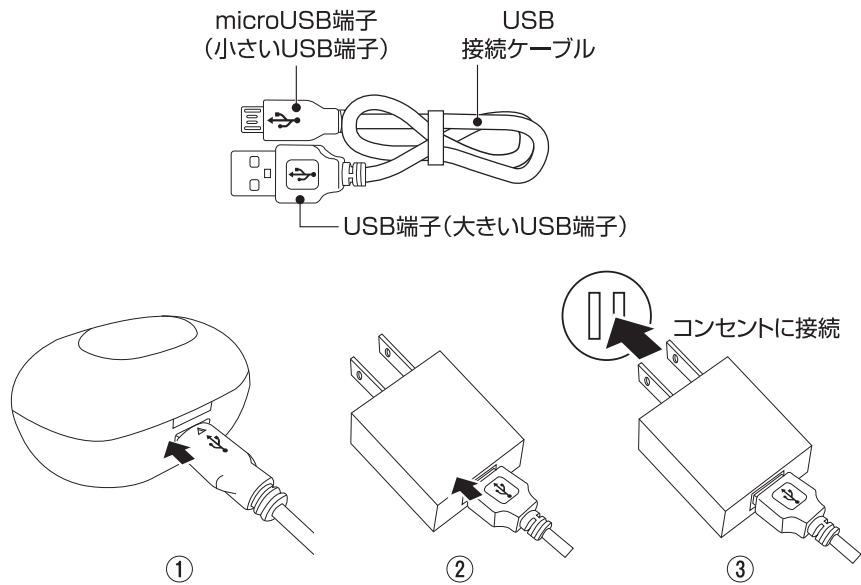

② 集音器の充電


- ① 集音器の電源をオフにします。
- ② 充電ケースの蓋を開き、集音器を充電ケースのLR表示に従い、充電端子に接触させ収納します。LEDインジケータが青く点灯し、集音器に充電を開始します。
充電が終了すると左右のLEDインジケーターが白く点灯します。

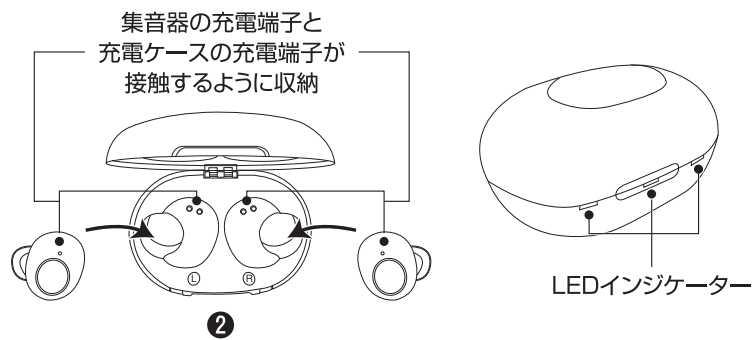

- 初めて使う際は充電ケースを約3.5時間、集音器を約2時間充電してください。
- フル充電時、連続約12時間使用可能です。
※使用環境および電池の状態により充電時間および電池持続時間は変化しますので目安としてください。
- 長時間使用しない場合でも月に一度を目安に充電してください。

4. 集音器のつけ方

1. 集音器の電源をオフにします。
2. 集音器を下図のように充電端子が上になるように持ち、耳穴に入れてください。

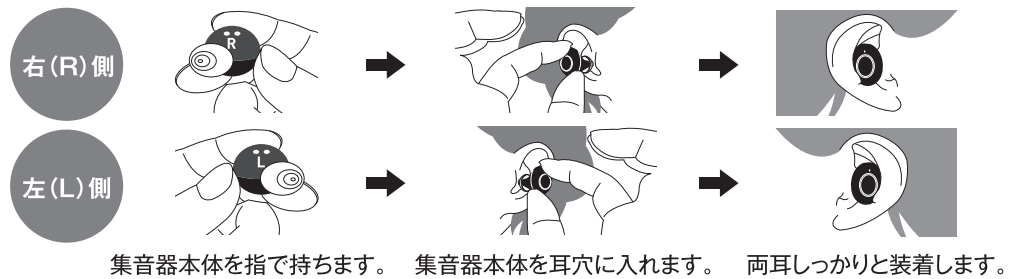

5. 電源のオン／オフ

電源ボタンを長押しすると電源がオンになります。
電源がオンになるとピー・ピーのアラーム音とLEDインジケーターが約3秒白く点灯します。
電源ボタンをもう一度長押しするとピー・ピーのアラーム音とLEDインジケーターが約2秒青く点灯し、電源がオフになります。



6. 音量調節

電源をオンすると本集音器は前回使用時の音量で起動します。
本集音器は6段階の音量調節が可能です。左右の音量調整ボタンを押した際、お知らせ音を発し音量が変化したことを教えてくれます。音量調整ボタンを押すたび音が大きくなり、最大音量の次は最小音量になります。
音量が最大になると、ピーピーピーとアラーム音でお知らせします。
左右の音量調整ボタンを操作し、自分に合ったレベルに音量を調整してください。



- 音量が大きすぎると耳の負担が大きくなり、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。自分に合った音量を調節してください。
- 音量を急激に上げるとハウリングをおこすことがあります。

7. ハウリング(ピーピー音)の抑制方法

集音器がピーピーという現象をハウリングといいます。ハウリングは集音器で増幅された音が漏れて、再び集音器のマイクに入ることにより起こります。このために集音器の音を大きくするほどハウリングしやすくなります。スイッチを入れた状態で集音器を机の上に置いたり、耳に入れる際にピーピー言ったりすることは、集音器が音を増幅している証拠で、故障ではありません。イヤークリップのサイズが耳穴に合っていないと、音が漏れてハウリングの原因になりますので、耳穴のサイズにあったイヤークリップを選んでください。その時、集音器にイヤークリップを取り付ける際、イヤークリップが集音器から外れないように取り付けて下さい。集音器がきちんと耳穴に入っていないと間から音が漏れハウリングの原因になります。

8. お手入れ方法

本製品を使用する前は綿棒等で耳をきれいに掃除してください。
使用後は綿棒等でイヤークリップの周りの耳垢等の汚れをきれいに掃除してください。
耳垢等の汚れにより、イヤークリップが詰まり故障する恐れがあります。
汚れがひどい時は、中性洗剤をうすめた液を布に含ませて拭いてください。



9. 故障かな？と思ったら

音が聞こえない	電源は入っていますか？	電源スイッチを入れてください。
	ボリューム設定は適切ですか？	ボリューム設定を最適にしてください。
	イヤークリップに耳垢が付いていませんか？	綿棒等できれいに掃除してください。 耳穴の掃除をしてください。
	電池が消耗していませんか？	集音器を充電ケースに入れて充電してください。

10. 主な仕様

基準周波数	2300Hz	
最大音響利得	22dB±5dB	
使用音量調節	6段階	
電源	USB DC5V (充電ケース)	
充電電流	90mA (充電ケース)	
充電可能回数	500回 (集音器)	
	500回 (充電ケース)	
充電時間	1～2時間 (集音器)	
	約3.5時間 (充電ケース)	
充電ケースをフル充電時の 集音器充電可能回数 (集音器左右セット)	3～4回 (目安)	
集音器使用時間	約12時間	
音声	ステレオ	
サイズ	集音器	21×18×22mm
	充電ケース	42×59×29mm
重量	集音器	約8g (左右セット)
	充電ケース	約30g
使用温湿度	－10℃～40℃ 30～75%RH (結露しないこと)	
保存温湿度	－10℃～50℃ 90%RH以下 (結露しないこと)	
同梱品	集音器 (左右)、USB ACアダプター、USB接続ケーブル 充電ケース、イヤークリップ (大、中、小各2個)	

原産国：中国

発売元

株式会社 **ケンコー・トキナー**

〒164-8616
東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル

ケンコー・トキナーホームページ
<https://www.kenko-tokina.co.jp/>



お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。
パソコンからは、「ケンコー・トキナー お問い合わせ」で検索。

ケンコー・トキナー お客様相談室 携帯・IP電話からは **03-6840-3389**
0120-775-818
※通話料金がかかります。
受付時間：月～金 9:15～17:30 (土、日、祝日、年末年始、夏季休業等を除く)

お願い 集音器や充電ケースなどの廃棄方法は、お住まいの市町村の方法に従ってください。

保証規定

保証期間:お買上げ日より1年間

(1) 修理の際は必ずお買上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコー・トキナーお客様相談室までお申し付けください。	(4) ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。
(2) お買上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。	(5) レシートは大切に保管してください。
(3) 正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は有料修理となります。(下記①～⑧など) ① 取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障 ② 保存上の不備のため湿度などによって生じた故障 ③ 火災や浸水・天災によって生じた故障 ④ 当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障 ⑤ その他類似的起因による故障 ⑥ 消耗品(LED等)のお取り替え ⑦ 落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水、浸水などによる故障 ⑧ 個人売買およびオークションなどでご購入の場合	(6) 修理品に送料が掛かった場合はお客様にてご負担願います。 (7) 当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証はいたしません。メモリーの破損やデータの消失などに関しては一切の責任を負いかねます。 (8) 出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。 (9) 本保証は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. (10) 本保証は保証規定により無償修理を約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 [お願い] 修理に関しましては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

■個人情報について

※本保証を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。
※ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報のうち、年齢・性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります。
※当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。
●お客様の承諾を得た場合。
●お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図られるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。