

デジアイピース ソフトウェア インストール、バージョンアップとアンインストール手順

【インストール、バージョンアップとアンインストール】

Ver 1.0.0 - 2018/03/20

使用している画像は「Windows 10」の物です。
Windowsのバージョンにより異なることがあります。

【1】インストール方法

本ソフトはインストーラーファイルを実行することで、インストールすることができます。
また、デスクトップにショートカットが作られます。作らないようにすることも可能です。
初期インストールフォルダーは、「C:¥デジアイピースソフト」となっています。インストール時に変更が可能です。

また、C:ドライブの「Program Files」や「Program Files(x86)」にはインストールしないでください。(下記ご注意参照)

インストールしたフォルダの中には下記のフォルダーとファイルがあります。

- ①デジアイピース実行ファイル(デジアイピース.exe)
- ② 同 上 ヘルプファイル(デジアイピース_Help.chm)
- ③インストール情報ファイル(INSTALL.DAT)
- ④ランタイムライブラリフォルダー(Runtime)
「Microsoft Visual C++ 2010 SP1 再頒布可能パッケージ(x86)」(vcredist_x86.exe)

最初の起動時に初期設定ファイル(デジアイピース.ini)を実行ファイルの存在するフォルダーに作成します。


(※)「デジアイピース.ini」の「デジアイピース」は実行ファイル名「デジアイピース.exe」の「デジアイピース」になっていますので、ファイル名を変更している場合は「変更しているファイル名.ini」になります。

【例】「デジアイピース3台目.exe」→「デジアイピース3台目.ini」

【ご注意】

・C:ドライブのフォルダーを指定しないC:ドライブ直下 や C:ドライブの「Program Files」や「Program Files (x86)」の下にインストールしないでください。


初期設定ファイルを作成できないため、起動時に下のメッセージを表示します。

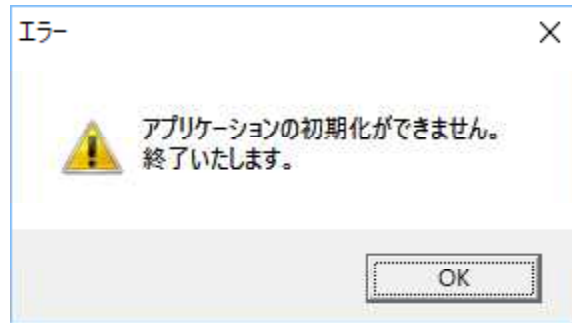

【1. 1】インストールの実行

デジアイピースソフトのインストーラー(デジアイピース_Vxxx_Setup.exe)を起動します。
(xxxにはバージョン番号が入ります。)

(1) ユーザーアカウント制御はWindows Vista以降に導入されたセキュリティ機能で、パソコンに重要な変更がされようとしているときにユーザーに許可を求めてくるものです。

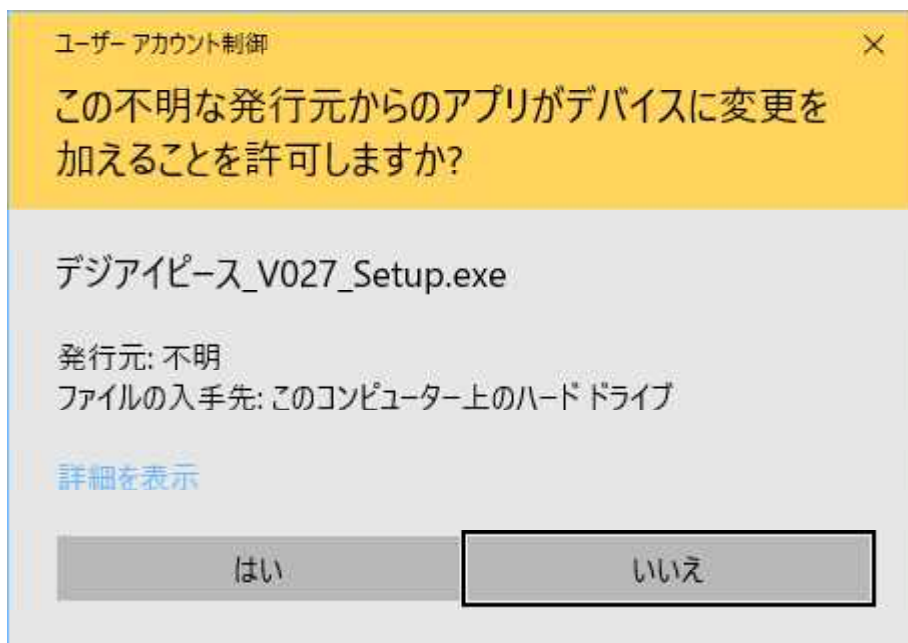

「デジアイピース_Vxxx_Setup.exe」であることを確認して、「はい」をクリックします。
xxx にはバージョン番号が入ります。
インストールを中止するには、「いいえ」をクリックします。

(2) インストーラーが起動します。



「次へ」をクリックします。

(3) インストール先を選択します。



表示のままで良ければ、「次へ」をクリックします。

インストール先を変更したい場合は、「参照」をクリックして、フォルダー参照ウィンドウを開き、フォルダーを選択してください。

(4)プログラムのショートカットを作成するスタートメニューのフォルダーを入力します。



特に入力しなくても構いませんので、「次へ」をクリックします。
スタートメニューにフォルダーを作成する場合は、フォルダー名を入力してください。
スタートメニューフォルダーを作成しない場合は、チェックを付けてください。

(5)デスクトップにプログラムのショートカットを作成するかどうかを選択します。

デジアイビスソフトのインストール



プログラムの追加処理を選択し、「次へ」をクリックしてください。

- デスクトップにショートカットを作成する(D)
- スタートアップにショートカットを作成する(S)
- 「送る」にショートカットを作成する(E)
- 「クイック起動」にショートカットを作成する(Q)

簡単インストーラ

戻る(B)

次へ(N)

キャンセル

デスクトップにショートカットを作成する場合は、そのまま「次へ」をクリックします。
作成したくない場合は、チェックを外してください。


(6) インストールの内容の確認ウィンドウが開きます。



良ければ、「次へ」をクリックします。

変更したい場合は、変更したい項目まで「戻る」をクリックしてください。


(7) インストール先フォルダーが存在しない場合、下記のウィンドウが開きます。

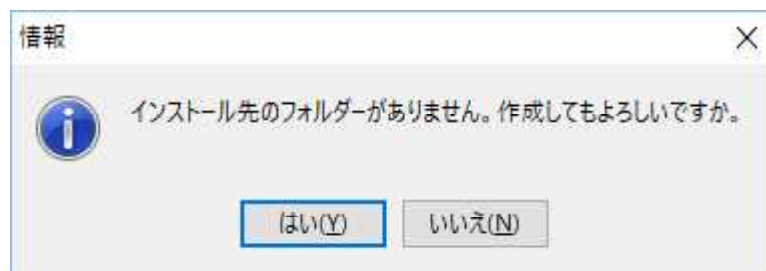

作成するので、「はい」をクリックして、(9)へ。

「いいえ」をクリックすると(6)の画面に戻ります。

(8) インストール先フォルダーが存在した場合、下記のウィンドウが開きます。

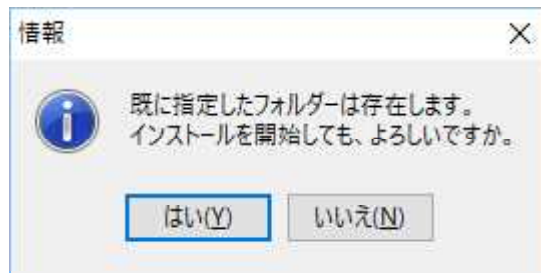

以前にインストールしたフォルダーに上書きインストールしても良いときは、「はい」をクリックします。


上書きインストールをしたくないときは、「いいえ」をクリックして、前のウィンドウに戻り、「戻る」をクリックして、(3)インストール先の選択まで戻って、フォルダーを変更してください。

(9) インストール完了。



「完了」をクリックして、インストーラーを終了します。

(2)から(6)のウィンドウで「キャンセル」をクリックすると、下記のウィンドウが開きます。

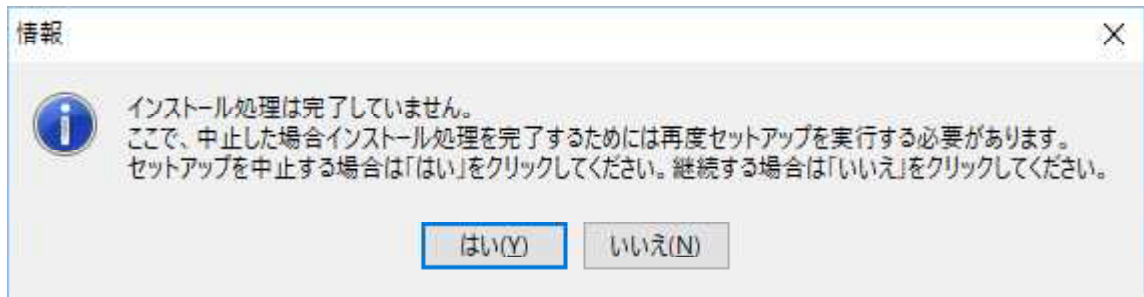


インストールを中止したい場合は、「はい」をクリックします。
継続したい場合は、「いいえ」をクリックします。

(10) デスクトップの「デジアイピースソフト」のショートカットをダブルクリックして、「デジアイピースソフト」が起動するかどうか確認してください。



(11) 下記のウィンドウが表示されて起動しない場合は、【1. 2】ランタイムライブラリのインストールを参照して、ランタイムライブラリをインストールしてください。

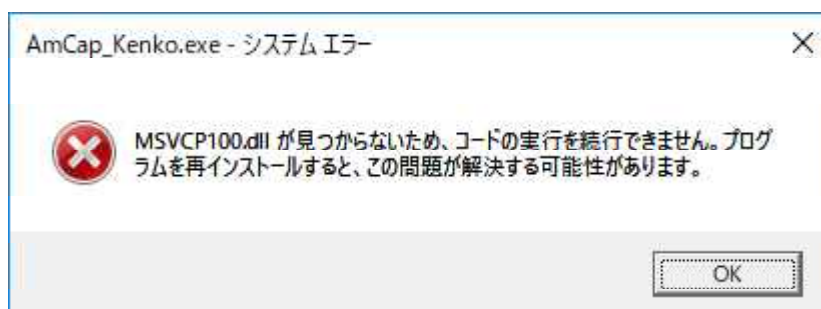

デジアイピースソフトの実行には、ランタイムライブラリ「Microsoft Visual C++ 2010 SP1 再頒布可能パッケージ (x86)」のインストールが必要になります。

【1. 2】ランタイムライブラリのインストール

デジアイピースソフトをインストールしたフォルダの中の「Runtime」フォルダの中の「vcredist_x86.exe」を実行します。


- (1) ユーザーアカウント制御はWindows Vista以降に導入されたセキュリティ機能で、パソコンに重要な変更がされようとしているときにユーザーに許可を求めてくるものです。



起動するソフトが「vcredist_x86.exe」であることを確認して、「はい」をクリックしてインストールを実行します。

「いいえ」でインストールを中止します。


- (2) 「ライセンス条項の同意」ウィンドウが表示されるます。

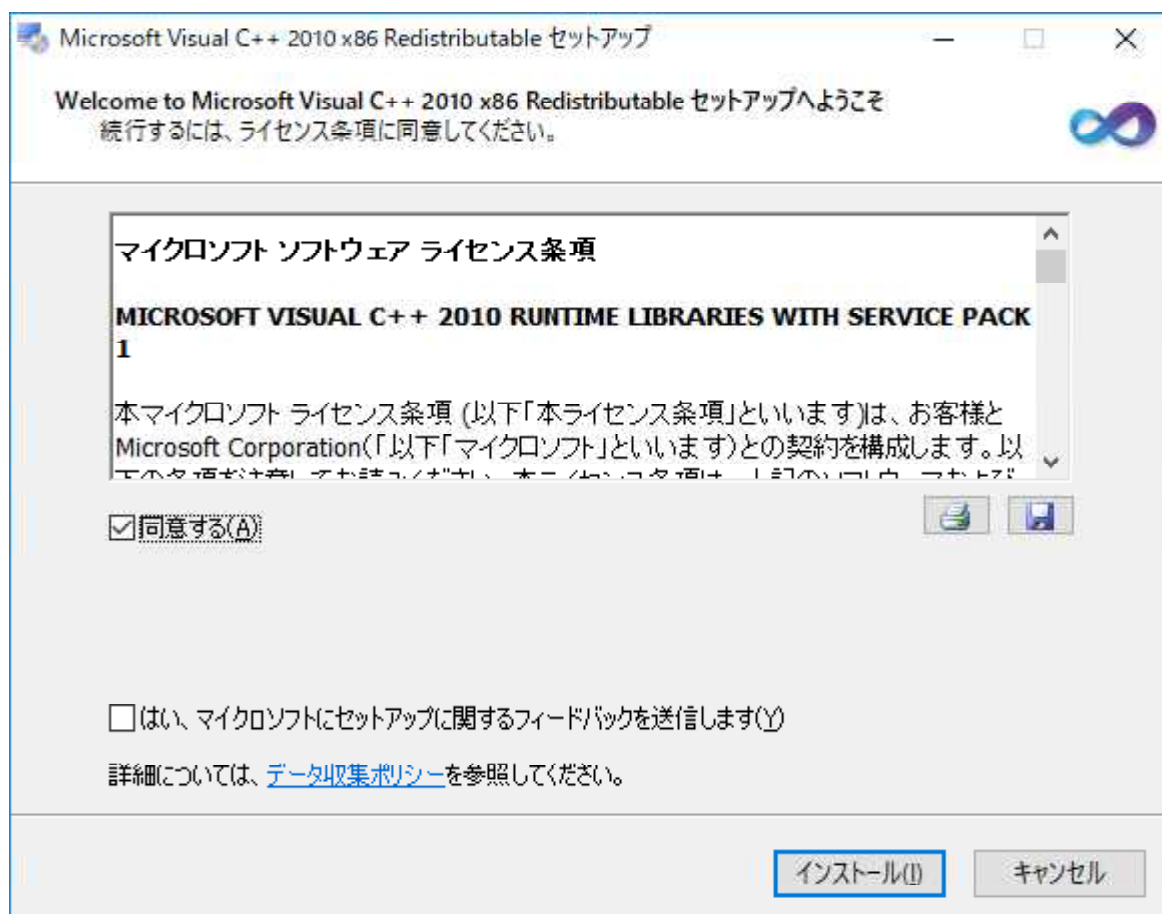

「同意する」の左側の口をクリックして口にチェックを付けて、「インストール(I)」をクリックしてインストールを実行します。


「キャンセル」でインストールを中止します。

(3)「インストールの進行状況」ウィンドウが表示されます。

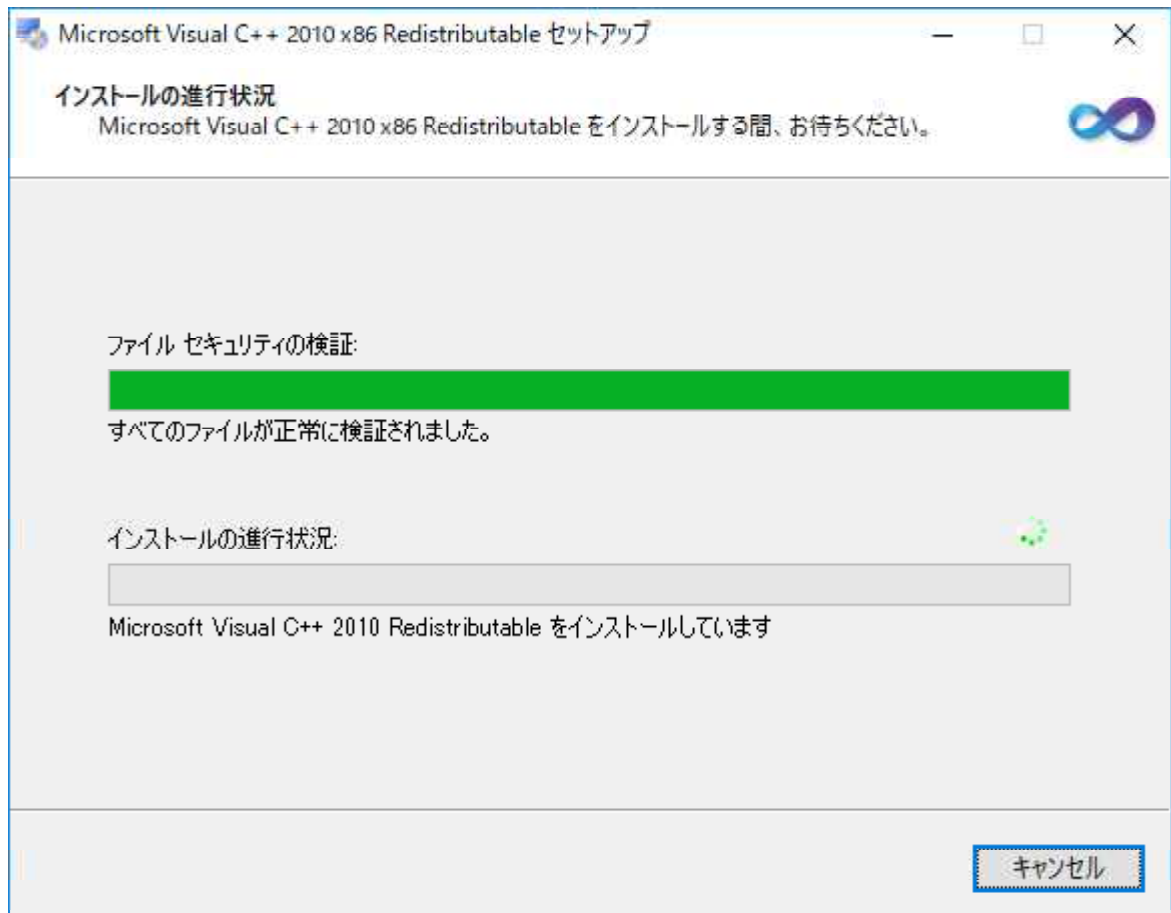

そのままお待ちください。
「キャンセル」でインストールを中止します。

(4)「インストールが完了しました」ウィンドウが表示されるます。

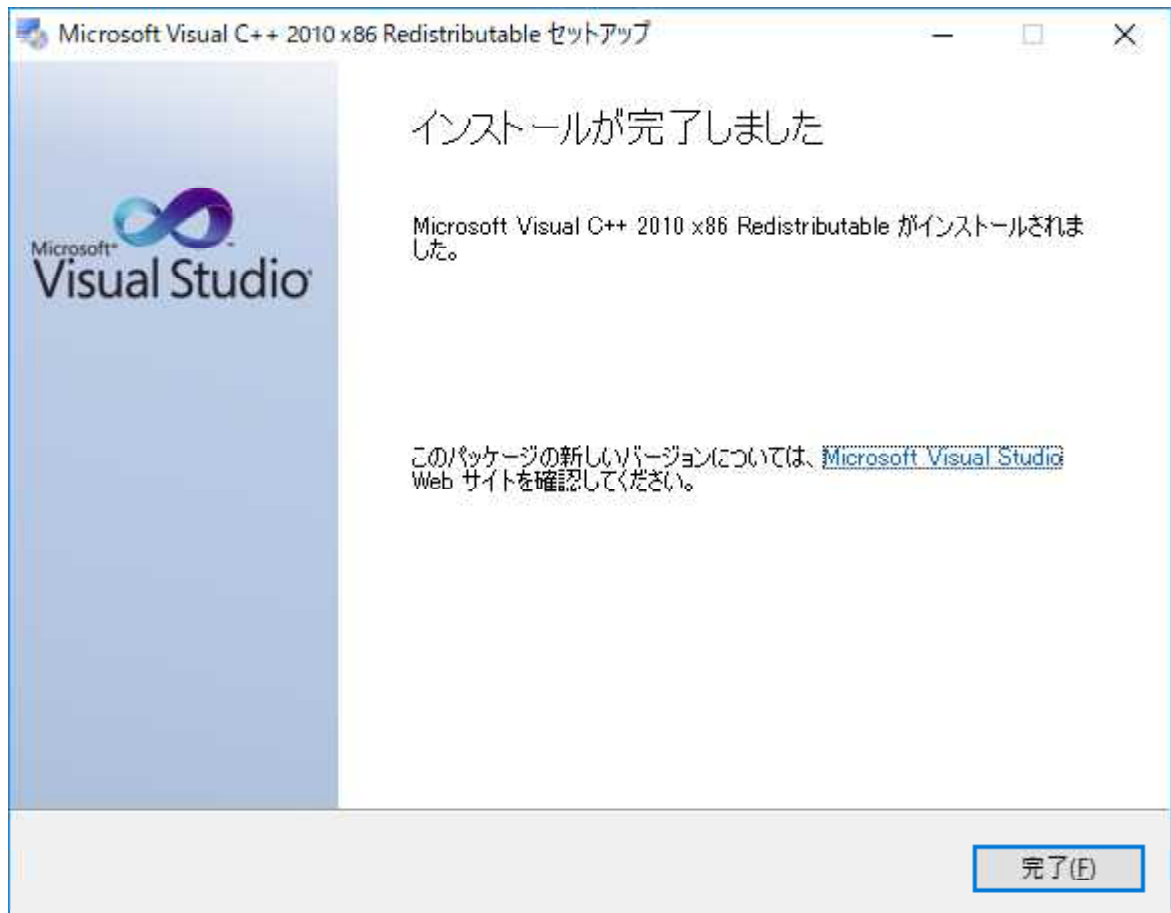

「完了(F)」をクリックして、インストールの終了です。

(5) デスクトップの「デジアイピースソフト」のショートカットをダブルクリックして、「デジアイピースソフト」が起動するかどうか確認してください。



【1. 3】保存フォルダーの設定

(1) インストール直後の「保存フォルダー」は、「デジアイピース」ソフトをインストールしたフォルダーとなっています。

初期の「保存フォルダー」は、「C:¥デジアイピースソフト¥Save_Data¥」となっています。

次の(2)で示すように変更が可能です。

(2)「ファイル(F)」メニューの「保存フォルダーの設定(F)」から保存フォルダーを他のフォルダーに設定できます。

詳細は、「当ヘルプ」の「メニュー」の「ファイル」の「保存フォルダーの設定」を参照してください。

【2】バージョンアップの方法


本ソフトはインストーラーファイルを実行することで、バージョンアップすることができます。ただし、初期フォルダー以外にインストールされている場合は、インストールするフォルダーを既にインストールされているフォルダーに変更してください。

【3】アンインストール方法

(1) アンインストールする前に、本ソフトを起動し、「ファイル(F)」メニューの「保存フォルダーの設定(F)」をクリックして、設定画面を表示させ、【参照】ボタンをクリックして、保存したファイルを確認し、必要であれば他のフォルダーやメディアにバックアップしてください。


(2) コントロールパネル→プログラムのアンインストール、またはスタート→設定→アプリから「デジアイピースソフト」を見つけて、アンインストールをクリックして、画面の指示に従ってアンインストールしてください。

① スタートから設定のアプリと機能を表示させます。

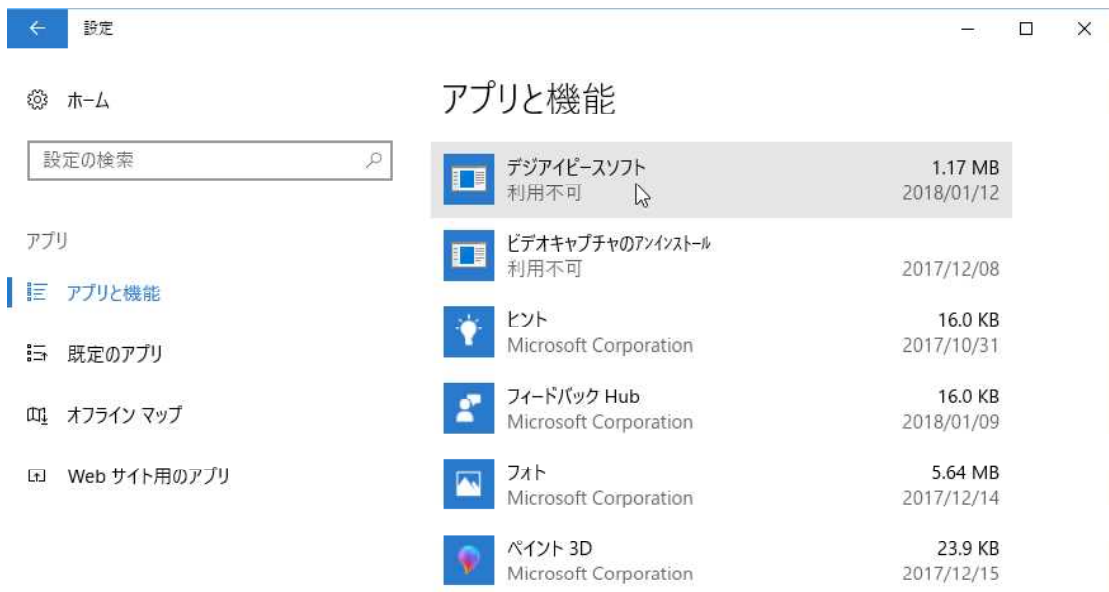


一覧から「デジアイピースソフト」を表示させてクリックします。

②「デジアイピースソフト」の下に「アンインストール」ボタンが現れます。

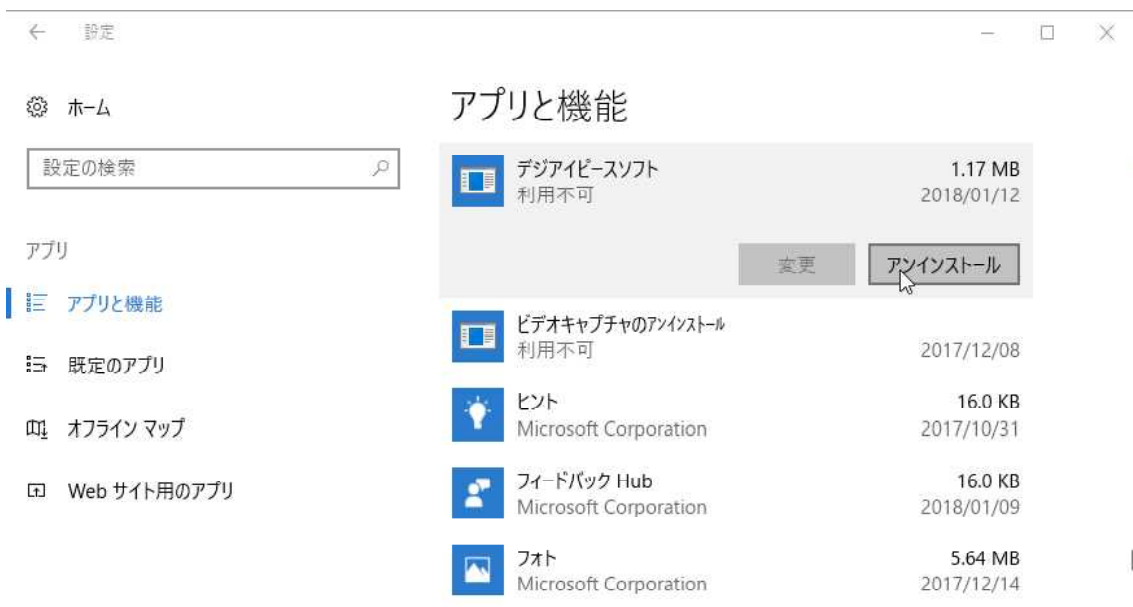


「アンインストール」ボタンをクリックします。

- ③このアプリとその関連情報がアンインストールされます。「アンインストール」ボタンが表示されます。

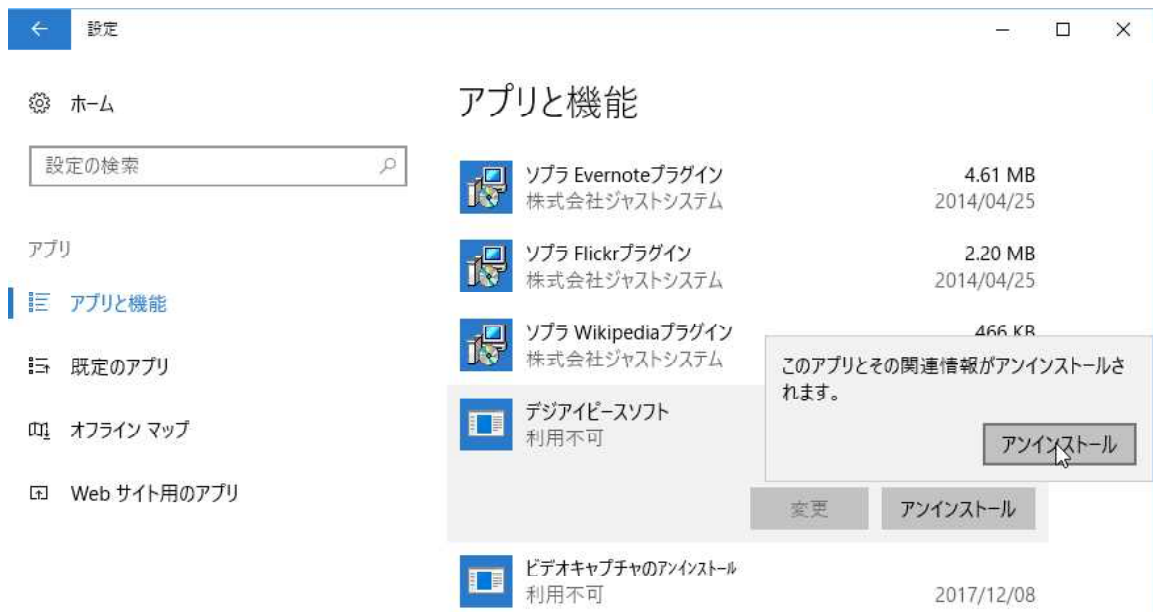


「アンインストール」ボタンをクリックします。

- ④ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示されます。

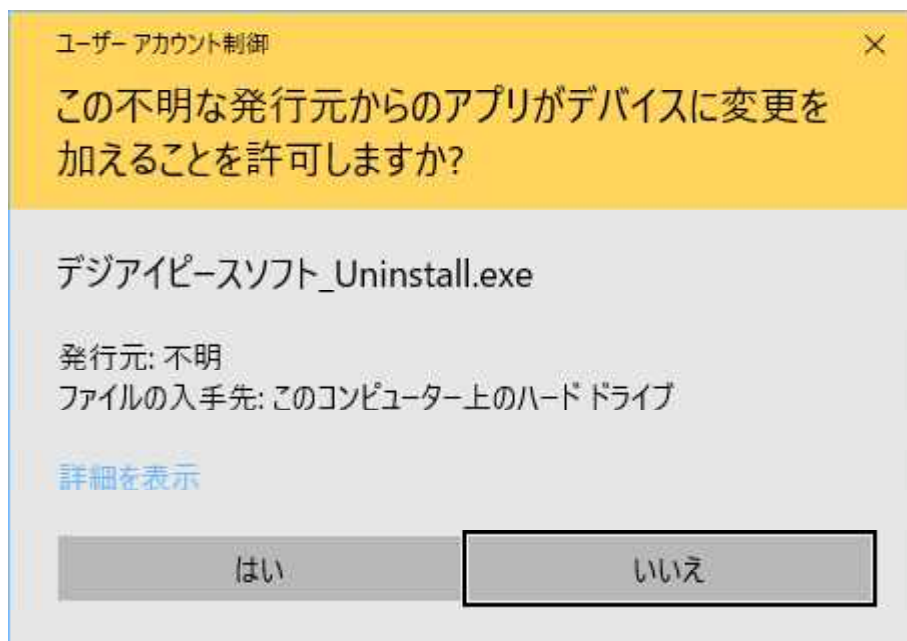

「デジアイピースソフト_Uninstall.exe」であることを確認して、「はい」をクリックします。
アンインストールを中止するには、「いいえ」をクリックします。

⑤スタートから設定のアプリと機能を表示させます。

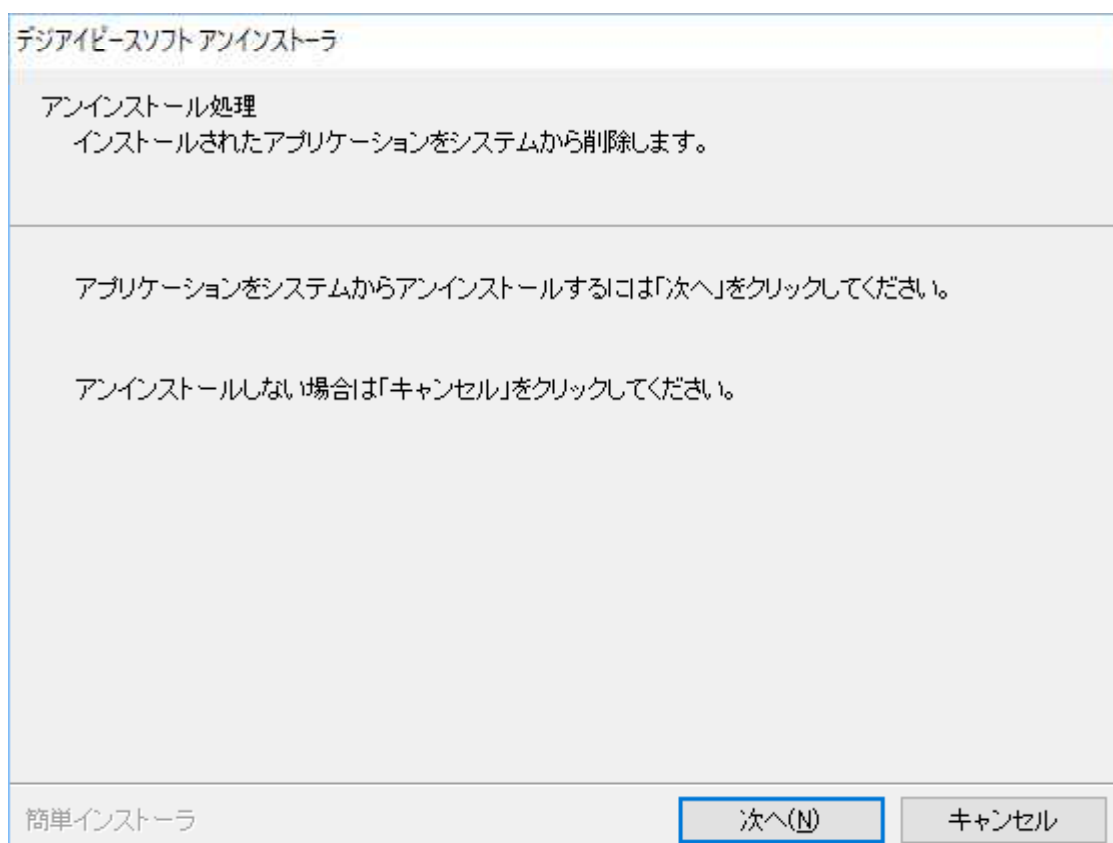


アンインストールするには、「次へ」をクリックします。
アンインストールを中止するには、「キャンセル」をクリックすると、確認ウィンドウが表示されます。




「はい」をクリックするとアンインストールを中止して終了します。
「いいえ」をクリックすると⑤に戻ります。

⑥再度確認ウィンドウが表示されます。

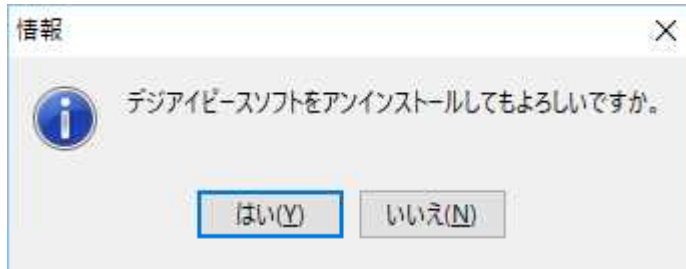


アンインストールするには、「はい」をクリックします。
「いいえ」をクリックするとアンインストールを中止して⑤に戻ります。

⑦個人設定の削除の問い合わせウィンドウが表示されます。

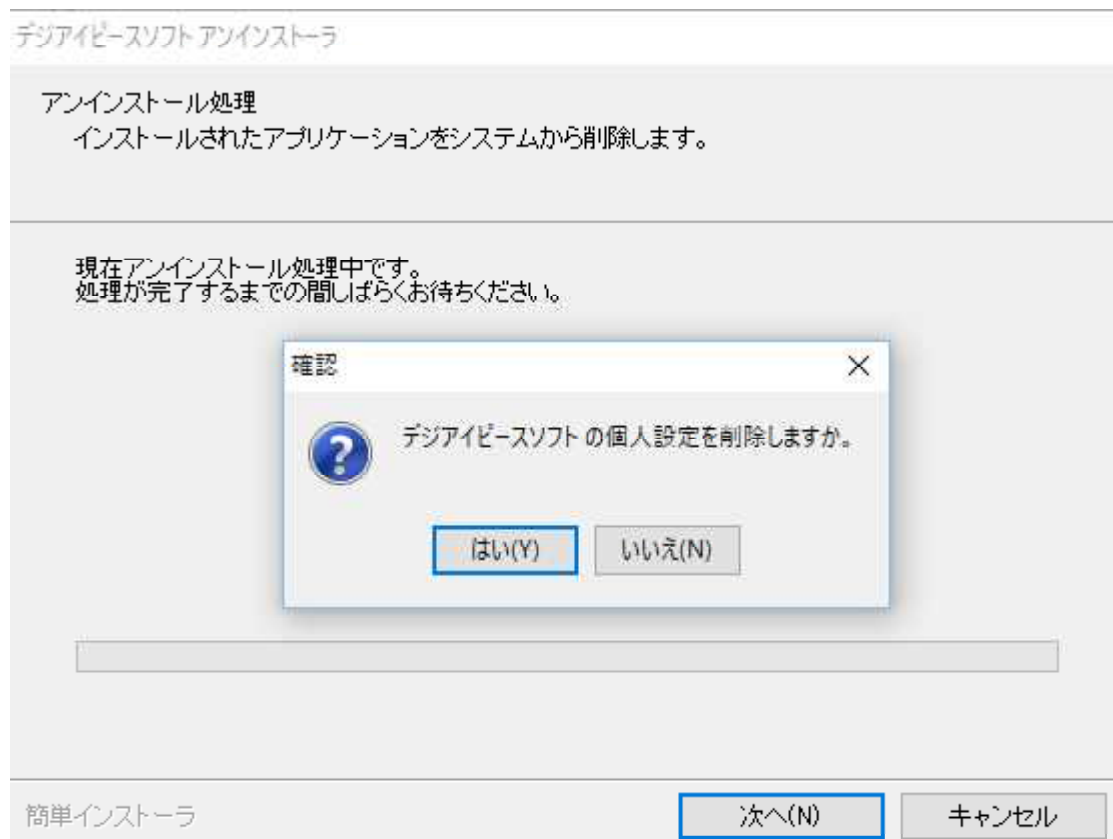

個人設定を削除するには「はい」を、削除しない場合は「いいえ」をクリックするとアンインストールが実行されます。

⑧アンインストール完了です。

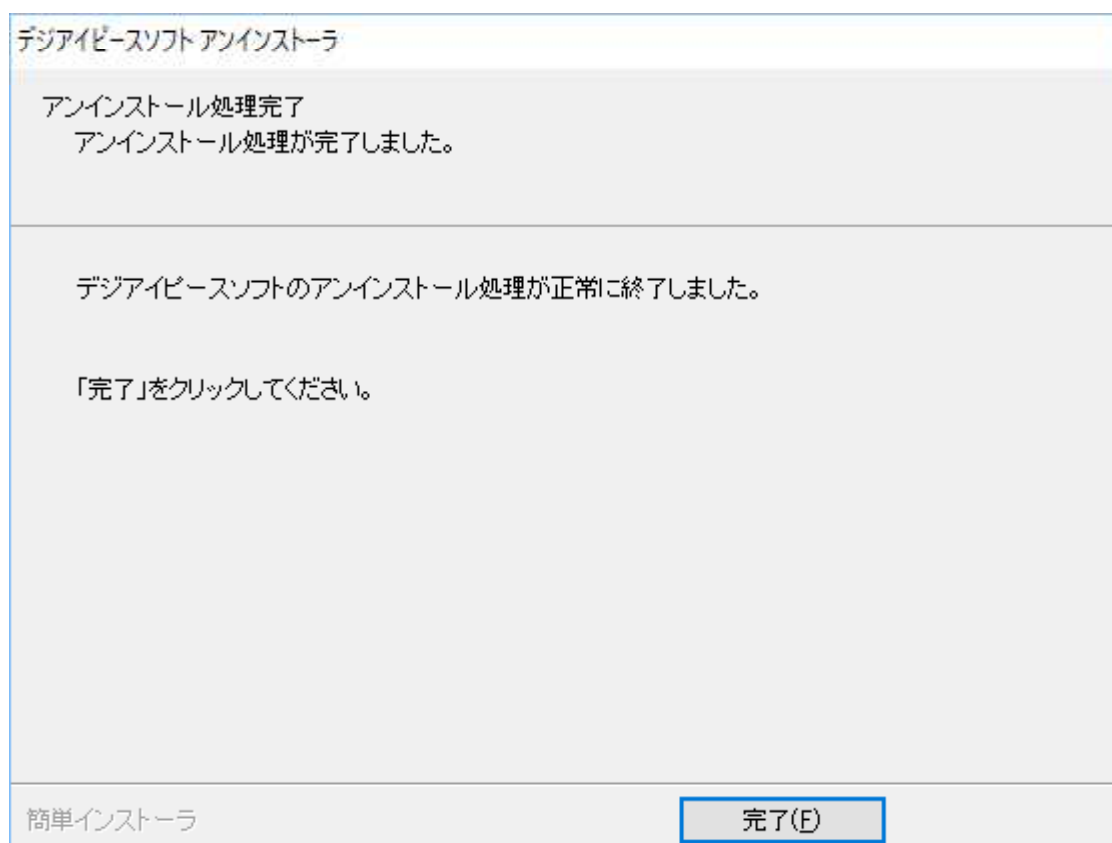

(3) 保存フォルダーに保存されている下記のファイルは残ったままになります。
念のため他のフォルダーやメディアにバックアップすることを推奨いたします。

①Save_Dataフォルダ

動画ファイル(デジアイピース_yyyymmdd-hhmmss. avi)

静止画ファイル(デジアイピース_yyyymmdd-hhmmss. jpg)

(yyyymmdd-hhmmss は、日付-時刻を表しています)

②初期設定ファイル(デジアイピース. ini)

(※)「デジアイピース_yyyymmdd-hhmmss. avi」の「デジアイピース」は実行ファイル名「デジアイピース. exe」になっていますので、ファイル名を変更している場合は「変更しているファイル名_yyyymmdd-hhmmss. avi」になります。

【例】「デジアイピース3台目.exe」では、
「デジアイピース3台目_yyyymmdd-hhmmss.avi」になります。